

Bruke AED Manager

70-00974-17 E

Copyright © 2014 Cardiac Science Corporation. Med enerett.

Innhold

| | |
|--|----|
| ◆ Om AED Manager | 2 |
| ◆ Angi AED-konfigurasjon og gjenopplivningsparametre | 7 |
| ◆ Gjennomgå en gjenopplivning | 13 |
| ◆ Administrere AED-enhetene | 18 |



AT THE HEART OF SAVING
LIVES™

Om AED Manager

AED Manager hjelper utrykningsleger, AED-administratorer (Automated External Defibrillator) og ambulansesarbeidere med å konfigurere Powerheart® G5 AED-enheter og gjennomgå hendelser med gjenopplivning av personer som har blitt rammet av plutselig hjertestans.

| Med AED Manager kan du ... | Se side ... |
|--|-------------|
| Velge RescueCoach™ audio- og visuelle gjenopplivningsmeldinger som er tilpasset opplæringsbehovet og språket til en vanlig bruker* | 8 |
| Tilpasse mange aspekter av en gjenopplivningsprotokoll – for eksempel HLR-lengde og -type og sjokksikre tilstander* | 8 |
| Gjennomgå gjenopplivningshendelser, inkludert pasientens EKG | 13 |
| Tilpasse og legge til informasjon om en spesifikk pasient og gjenopplivning til dataene som er registrert på en AED-enhet | 16 |
| Se selvtest og andre hendelsesmeldinger for hver AED-enhet | 17 |
| Eksporthere lagrede demografiske og gjenopplivningsdata for andre bruksområder | 18 |
| Skrive ut og lagre PDF-rapporter | 18 |
| Fjernkonfigurere AED-enheter* | 19 |

Merk: *Gjenopplivningsinnstillinger kan bare fastsettes av autorisert, utdannet medisinsk personell.

Oversikt over AED Manager-vinduet

Liste over AED-enheter

1

2

3

4

5

6

AED INFORMASJON

AED-modell G5S-22P0
 Serienr. for AED-enheten M00000001019
 Antall gjenopplivninger 5
 Programversjon 4.18
 Maskinvareversjon 0
 Standard språkversjon en-AU 1.5
 Alternativ språkversjon ----

BATTERI INFORMASJON

Batterimodell XBTAED001A
 Sist rapportert batterinivå **68.0%**
 Installasjonsdato 10/24/2013

SJOKKINNSTILLINGER

Samme energi etter konvertering Aktvert
 Maksimum antall sjokk 1
 Per sekvens

VOKSEN

Protokoll for sjokkenergi 200VE 300VE 300VE
 VFVT-hastighet 160 Slag/min
 SVT-hastighet Ingen behandling

GENERELLE INNSTILLINGER

AED-identifisering
 Hovedspråk Standardspråk
 Totalt meldingsnivå for AED-enheten Avansert
 Lydstyrke Maksimum
 HLR først Deaktivert
 Melding ved oppstart Ring 113

HLR-INNSTILLINGER

VOKSEN

Type økt Tradisjonell HLR
 HLR-tidsavbrudd 0 sek
 HLR-metronommelding Ping
 HLR-metronomfrekvens 100 per min
 Avslutt økten når Fullfarte sett
 Antall sett 5
 Pust per sett 2

Liste over AED-enheter

- 1 Klikk på pilen for å skjule eller vise listen over AED-enheter.
- 2 Søkebok. Skriv navnet eller serienummeret til AED-enheten som skal vises i listen.
- 3 Liste over AED-enheter som har vært eller er koblet til datamaskinen. Velg en AED-enhet for å se informasjon om den.
 - Klikk på + for å vise listen over AED-enheter som er tilkoblet eller ikke tilkoblet. Klikk på - når listen er utvidet for å skjule listen over AED-enheter.

Konfigurasjons- og informasjonspaner for AED

- 4 Generell informasjon om AED-enheten, inkludert navn, type og batteristatus. Konfigurer innstillinger for AED-enheten her.
- 5 Se meldinger som er lagret av AED-enheten.
- 6 Se opptak av gjenopplivningsøker.

Kjøre AED Manager

AED Manager kan brukes på Windows XP®, Windows Vista® og Windows 7®. Du må være logget på Windows som enten en administrator eller vanlig bruker. Du kan ikke kjøre AED Manager hvis du er logget på som gjest.

Lukk alle programmer, spesielt de som bruker lyd- og videofiler, før du bruker AED Manager, for å sikre best mulig ytelse.

Slik åpnes AED Manager:



1. Dobbeltklikk på **AED Manager**-ikonet på skrivebordet.
2. Velg enten **Administrator** eller **Vanlig bruker** når innførings skjermen vises. Skriv inn passordet for **Administrator**.
 - **Administrator** lar deg ikke bare se AED-informasjon, men også endre og oppdatere AED-innstillingene.

Viktig: Tilgang på administrator-nivå bør begrenses til dem som har medisinsk utdanning og tillatelse til å endre på gjenopplivningsprotokoller eller andre behandlingssinnstillinger på en AED-enhet.

 - **Vanlig bruker** gir kun tilgang til å se, eksportere og skrive ut AED-informasjon.
3. Klikk på **Fortsett**.

Angi alternativer for AED Manager-bruksområder

Velg **Innstillinger** | **Alternativer**.

Angi disse alternativene på **Generelt**-panelet:

- ◆ **Språk:** Språket som skal brukes i AED Manager.
 - Merk:** Start AED Manager på nytt for at det valgte språket skal tre i kraft.
- ◆ **Passord:** Hvis du startet AED Manager som administrator, kan du klikke på **Endre passord** for å oppdatere administratorpassordet.

Velg en mappe på **Eksport**-panelet for å lagre gjenopplivningsdata for eksport. Klikk på **Bla gjennom** for å velge, og gå til mappen du vil bruke.

Overføre AED-data til AED Manager

Gjenopplivnings- og hendelsesdata kan overføres med en USB-enhet fra én eller flere AED-enheter eller direkte med en USB-kabel fra en AED-enhet til *AED Manager*. Du kan også bruke USB-enheter på stedet til å rekonfigurere AED-enheter uten å bringe dem til datamaskinen.



ADVARSEL! Fare for elektrisk støt og brann.

Ikke koble til telefoner eller ikke-godkjente tilkoblinger i kontakten på dette utstyret.



FORSIKTIG. Mulig tap av data.

Ikke koble fra USB-enheten eller AED-enheten under dataoverføringen. Data kan gå tapt eller bli ødelagt.

USB-enhet:

Merk: Bruk ett av disse USB-merkene for mer pålitelig dataoverføring: Lexar JumpDrive, SanDisk Cruzer eller HP.

1. Koble fra defibrilleringselektrodenene.
2. Koble USB-enheten til USB-porten.
 - Informasjon blir kopiert fra AED-enheten til USB-enheten.
 - AED-enheten varsler om at USB-enheten kan fjernes når det er fullført.
3. Koble fra USB-enheten.
4. Koble elektrodene til AED-enheten, og lukk løkket.
5. Kopier gjenopplivningsdataene fra USB-enheten til *AED Manager*.



Slik viser du dataene:

- ◆ Koble USB-enheten til USB-porten på datamaskinen. Lukk Windows Explorer-vinduet hvis det åpner seg.
Alle AED-enheter som har data på USB-enheten, dukker opp på listen over AED-enheter under Ikke tilkoblet. Du kan vise, skrive ut og eksportere data på samme måte som med en tilkoblet AED-enhet.

USB-kabel:

1. Koble fra defibrilleringselektrodene.
2. Koble USB-kabelen til USB-porten.
3. Koble den andre enden til datamaskinens USB-port. Lukk Windows Explorer-vinduet hvis det åpner seg.
4. Start *AED Manager*.
 - Meldingen Kommunikasjonmodus vises på AED-enheten.
 - AED-enheten dukker opp på listen over AED-enheter og dataene blir kopiert til databasen til AED Manager.
5. Koble fra USB-kabelen
Når du kobler fra AED-enheten, flyttes ikonet fra **Tilkoblet** til **Ikke tilkoblet** på listen over AED-enheter.
6. Koble til elektrodene.



Angi AED-konfigurasjon og gjenopplivningsparametre

Viktig: Du må ha administratortilgang for å endre gjenopplivningsparametre. Logg på som administrator ved oppstart av AED Manager. Logg av og start på nytt hvis du allerede er pålogget som bruker.

Klikk på ikonet eller navnet til en AED-enhet på listen over enheter for å vise den nåværende konfigurasjonen.

Under **Sammendrag**-fanen kan du tilpasse mange egenskaper for hver AED-enhet. Panelene i Sammenheng-vinduet brukes til å angi ulike funksjoner på AED-enheten:

| | | |
|------------------------------------|--|---------|
| Generelle innstillinger | Språk- og gjenopplivningsmeldinger | side 8 |
| Tidsinnstillinger | Dato og klokkeslett på klokken til AED-enheten | side 9 |
| Sjokkinnstillinger | Grenseverdier for å gi behandling | side 9 |
| HLR-innstillinger | HLR-protokoller for behandling for voksne og barn | side 11 |
| Innstillinger for HLR-enhet | Grenseverdier for HLR-meldinger når elektroder for voksne med HLR-enhet er koblet til AED-enheten. | side 12 |

Klikk på **Lagre konfigurasjon** eller ikonet **Lagre til AED-enhet** på verktøylinjen når parametrene er ferdig innstilt. Konfigurasjonen blir sendt fra AED Manager til den tilkoblede AED-enheten.

Klikk på ikonet **Angre alle endringer** på verktøylinjen for å tilbakestille alle konfigurasjonsinnstillingene på konfigurasjonsfanene til originalverdiene siden forrige lagring.

Klikk på **Gjenopprett fabrikkstandard** og lagre for å endre AED-innstillingene tilbake til verdiene de ble levert med.

Generelle innstillinger: Angi språk og meldinger

Bruk panelet **GENERELLE INNSTILLINGER** til å angi disse alternativene.

| Alternativ | Beskrivelse |
|---|---|
| AED-identifisering | Navnet til AED-enheten slik det vises på listen over enheter og i rapporter. Navnet kan bestå av opptil 16 tegn. Disse tegnene kan brukes: A-Z, a-z, 0-9, tankestrek, mellomrom. Hvis du har ansvar for flere AED-enheter, bør du velge en standard for navn, for eksempel basert på hvor enhetene befinner seg. |
| Hovedspråk (Kun for modeller med to språk) | Velg språket AED-enheten skal bruke når lokket åpnes. Brukeren kan bytte til det andre språket under en gjenopplivning. |
| Totalt meldingsnivå for AED-enheten | Grunnleggende, Standard eller Avansert Se <i>brakerhåndboken for Powerheart G5</i> hvis du vil se beskrivelser og meldingene som brukes på hvert nivå. |
| Lydstyrke | Lavt – brukes på kontor eller andre steder med lite støy. Maksimum – brukes utendørs eller andre steder med mye støy. |
| HLR først | AED-enheten kan enten begynne med å analysere pasientens EKG eller instruere brukeren om å sette i gang HLR. Aktivert – AED-enheten gir meldinger om å utføre HLR først. Deaktivert – AED-enheten analyserer pasientens EKG først. |
| Melding ved oppstart | AED-enheten gir en startmelding når lokket åpnes. Ingen melding: AED-enheten spiller ikke av en melding ved oppstart. Ellers kan du velge en av disse meldingene: <ul style="list-style-type: none"> • Ring 113 • Ring nødhjelp |

Tidsinnstillinger: Still inn klokken

Slik stiller du inn klokken på AED-enheten:

1. Velg tidssone fra **Tidssone/tidsavvik**-menyen.
2. Klikk på **Synkroniser dato/klokkeslett**.

Klokkeslettet på AED-enheten blir synkronisert med datamaskinens klokkeslett når du klikker på **Lagre konfigurasjon**.

Merk: Klokkeslett som vises i AED Manager, blir ikke justert for sommertid.

Sjokkinnstillinger: Innstilling av grenseverdier for rytmepåvisning

Bruk alternativene i **SJOKKINNSTILLINGER**-panelet til å stille parametrene for rytmepåvisning.

AED-enheten kan ha ulike protokoller for elektroder for voksne og barn.

| Alternativ | Beskrivelse |
|------------------------------------|---|
| Samme energi etter konvertering | Når denne er aktivert, leverer AED-enheten den forrige defibrilleringsenergien neste gang det er nødvendig å gi et sjokk hvis pasientens rytme ikke lenger er sjokksikker. |
| Maksimalt antall sjokk per sekvens | Maksimalt antall sjokk før AED-enheten går inn i HLR-modus. |
| Protokoll for sjokkenergi | Velg protokollen for energien som leveres ved et sjokk. Hvis defibrilleringselektroder for barn er tilkoblet AED-enheten, bruker den tallet i Pediatrisk-feltet. |
| VF/VT-hastighet | Den laveste hjertefrekvensen der AED-enheten påviser ventrikkelflimmer og avgjør om rytmen er sjokksikker. Hvis defibrilleringselektroder for barn er tilkoblet AED-enheten, bruker den tallet i Pediatrisk-feltet. |

| Alternativ | Beskrivelse |
|-------------------|---|
| SVT-frekvens | <p>Tar SVT (supraventrikulær takykardi) med i vurderingen om rytmen er sjokksikker eller ikke. Hvis defibrilleringselektroder for barn er tilkoblet AED-enheten, bruker den tallet i Pediatrisk-feltet.</p> <p>AV (ingen SVT-overvåking):</p> <ul style="list-style-type: none">• Hjerterefrekvenser under VF/VT-frekvensen er aldri sjokksikre• Hjerterefrekvenser over VF/VT-frekvensen er alltid sjokksikre <p>Ingen behandling (SVT-overvåking, men behandlingen som gis, er avhengig av følgende):</p> <ul style="list-style-type: none">• Hjerterefrekvenser under VF/VT-frekvensen er aldri sjokksikre• Hjerterefrekvenser over VF/VT-frekvensen blir alltid klassifisert som sjokksikre eller ikke sjokksikre basert på kurvemorfologiene <p>160-300:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hjerterefrekvenser under VF/VT-frekvensen er aldri sjokksikre• Hjerterefrekvenser over den fastsatte SVT-frekvensen er alltid sjokksikre• Hjerterefrekvenser mellom VF/VT-frekvensen og den angitte SVT-frekvensen blir alltid klassifisert som sjokksikre eller ikke sjokksikre basert på kurvemorfologiene |

HLR-innstillinger: Angi gjenopplivningsparametre

AED-enheten kan ha ulike gjenopplivningsprotokoller for voksne og barn (pediatrisk).

| Alternativ | Beskrivelse |
|------------------------|--|
| Type økt | Tradisjonell HLR (kompresjoner og innblåsninger) og Kun kompresjoner bruker de samme innstillingene. Kun kompresjoner bruker kun HLR-tidsavbrudd og metronominnstillingene. |
| HLR-tidsavbrudd | Hvor lenge hver HLR-økt varer, målt i sekunder. Nedtellingstidtakeren på AED-enheten måler hvor lang tid som gjenstår. |
| HLR-metronommelding | Markerer takten på brystkompresjoner som brukeren må holde. Trykk – talemeldingen "trykk" kommer i den valgte HLR-metronomfrekvensen. Ping – AED-enheten lager en mekanisk metronomlyd i HLR-metronomfrekvensen. Ingen metronom – ingen lyd |
| HLR-metronomfrekvens | Takten på metronommeldingen i slag per minutt. |
| Avslutt økten når | Dette alternativet bestemmer den totale lengden på en økt. Fullførte sett – HLR-økten avsluttes når antallet HLR-sett går ut. Hvert sett inkluderer antallet kompresjoner og antallet innblåsninger per sett. Tiden utløper – økten avsluttes når HLR-tidtakeren når null. Det er mulig at det siste settet med kompresjoner og innblåsninger ikke er fullstendig. |
| Antall sett | Antall ganger brukeren får melding om å utføre kombinasjonen av kompresjoner og innblåsninger ved tradisjonell HLR. |
| Innblåsninger per sett | Antall innblåsninger før du begynner en ny runde kompresjoner. |
| Kompresjoner per sett | Antall brystkompresjoner før du gir innblåsninger. |

Innstillinger for HLR-enhet: Innstilling av grenseverdier for HLR-enheten

Modifiser alternativene i INNSTILLINGER FOR HLR-ENHET-panelet for å fastsette grenseverdiene for HLR-meldinger ved gjenopplivninger der HLR-enheten blir brukt.

| Alternativ | Beskrivelse |
|---|--|
| Kompresjonsfrekvens (kompresjoner/minutt) | Minimum: Hvis brukeren utfører kompresjoner under denne frekvensen, gir AED-enheten meldingen "Trykk raskere". Maksimum: Hvis brukeren utfører kompresjoner over denne frekvensen, gir AED-enheten meldingen "Trykk langsommere". |
| Kompresjonsdybde (cm) | Minimum: Hvis brukeren ikke når denne kompresjonsdybden, gir AED-enheten meldingen "Trykk hardere og slipp helt opp". Maksimum: Hvis brukeren trykker dypere enn dette, gir AED-enheten meldingen "Trykk mykere". |

Gjennomgå en gjenopplivning

Sammendrag-fanen under **Gjenopplivninger**-fanen viser klokkeslettet, antall defibrilleringssjokk som er gitt, og lengden på gjenopplivningen.



| Gjenopplivningssentral | | Sammendrag | AED-øyeblikksbilde |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|
| Sammendrag for gjenopplivning | | | |
| Informasjon om tilfelle | | | |
| Tilfelle-ID | 63_4962_55 | | |
| Dato/klokkeslett | 5/15/2014 12:01:57 PM (+-)Sommer tid | | |
| Antall sjokk | 1 | | |
| Gjenopplivningsvarighet | 123 sekunder | | |

Gå inn på **AED-øyeblikksbilde**-fanen for å se alle innstillingene som enheten var programmert med under gjenopplivningen. Se *Angi AED-konfigurasjon og gjenopplivningsparametre* på side 7 hvis du vil se beskrivelser av innstillingene.


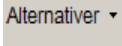



Se på EKG-kurven og gjenopplivningshendelser







Klikk på **Kurve og hendelser**-fanen under **Gjenopplivningsentral**-fanen.

Hendelseslisten viser alle AED-handlingene som utføres av enheten under gjenopplivningen.

Grafen under hendelseslisten viser et opptak av pasientens EKG og enhetsassistert HLR med gjenopplivningshendelser.

- ◆ Velg et element fra hendelseslisten.
Grafen flyttes til punktet i gjenopplivningsopptaket der hendelsen fant sted.
- ◆ Dra og slipp musen over kurven for å bla bakover og fremover i tid.
- ◆ Legg til notater til kurven. Høyreklikk der du vil legge til et notat i diagrammet. Velg **Legg til brukerkommentar** på kontekstmenyen. I dialogboksen **Opprett/rediger hendelseskriver** du inn navn og kommentar, og klikker deretter på **Lagre**.
- ◆ Bruk avspillingskontrollene til å spille av gjenopplivningen i sanntid (ett sekund av gjenopplivningen spilles av på ett sekund) og flytte fremover og bakover gjennom kurven og gjenopplivningen.

| | | | |
|---|-----------------------|---|--|
|  | Gå en side tilbake |  | Velg hvilke elementer du vil se: vis HLR-graf, vis gjeldende klokkeslett i hendelseslisten, vis hendelser som er lagt til av brukeren, vis hendelsesmarkører |
|  | Gå ett sekund tilbake | <input type="text" value="10"/> mm/mV | Fastsett den vertikale skalaen på EKG-grafen (5–25 mm/mV) |
|  | Spill av opptaket | <input type="text" value="25"/> mm/sek | Fastsett den horisontale skalaen på EKG- og HLR-grafene (10–40 mm/sekund) |
|  | Stopp avspillingen | <input type="text" value="2"/> mm/g | Fastsett den vertikale skalaen på HLR-grafen (1–3 mm/g, $g = m/sek^2$) |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
|  | Gå ett sekund frem |  | Klikk for å åpne kurve-fanen i et eget vindu. Du kan maksimere dette vinduet for å se opptaket på fullskjerm. |
|  | Gå en side frem |  | Dra markøren opp for å zoome inn eller ned for å zoome ut. Klikk på et forstørrelsesglass for å zoome inn ett trinn om gangen. |
|  | Skriv ut gjenopplivningskurven |  | Dra posisjonsmarkøren til venstre og høyre for å se på ulike deler av gjenopplivningen. |

Se på og oppdatere informasjon om et tilfelle

Klikk på **Gjenopplivninger**-fanen. Velg hvilken gjenopplivning du vil se på. Klikk på **Tilfelle**-fanen.

Bruk **Tilfelle**-skjemaet til å legge til demografisk informasjon om pasienten og generell informasjon om gjenopplivningen.

AED-enheten trenger ikke å være tilkoblet for å modifisere eller lagre denne informasjonen.

Slik fyller du ut skjemaet:

1. Skriv inn eller velg data fra rullegardinmenyen for å oppdatere eller legge til.
2. Klikk på **Lagre i database** når du er ferdig.

Skrive ut data om et tilfelle og gjenopplivningskurver

Du kan skrive ut informasjonen som vises på **Tilfelle**- og **Kurve**-fanene:

Slik skriver du ut bare kurven:



- ◆ Klikk på **Skriv ut**-ikonet under **Gjenopplivninger | Kurve og hendelser**-fanen på ikonlinjen.

Slik skriver du ut kurven, gjenopplivningshendelser og tilfelleinformasjon:

1. Høyreklikk på en gjenopplivning på listen over gjenopplivninger.
2. Velg **Skriv ut gjenopplivningsrapport**.
3. Velg informasjonen som skal skrives ut.
4. Klikk på **Skriv ut**.

Gjennomgå hendelsesmeldinger

Du kan se detaljer om AED-hendelser og feil på **Hendelseslogg**-fanen.

AED-enheten registrerer klokkeslettene når ulike handlinger skjer, for eksempel selvtester av systemet og åpning og lukking av lokket.

1) Hendelseslogg:

Lister opp alle selvtestene som er registrert av enheten.

2) Gjeldende feil:

Lister opp feil som er generert av AED-enheten.

| Hendelseslogg | | | Hend. | Underinformasj. |
|---|---------|--|----------|-----------------|
| Klokkeslett | | | | |
| 5/8/2014 2:18:45 AM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå på Fullført |
| 5/8/2014 2:19:12 AM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå på Fullført |
| 5/8/2014 2:19:34 AM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå av Fullført |
| 5/8/2014 4:04:40 AM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå på Fullført |
| 5/10/2014 3:48:23 AM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå på Fullført |
| 5/10/2014 3:48:29 AM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå på Fullført |
| 5/10/2014 3:48:50 AM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå av Fullført |
| 5/10/2014 3:48:58 AM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå på Fullført |
| 5/15/2014 4:23:32 PM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå på Fullført |
| 5/15/2014 4:23:40 PM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå på Fullført |
| 5/15/2014 4:24:17 PM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå på Fullført |
| 5/15/2014 4:25:47 PM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå på Fullført |
| 5/15/2014 4:25:52 PM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå av Fullført |
| 5/15/2014 4:52:04 PM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå på Fullført |
| 5/15/2014 4:52:22 PM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (+)Sommeretid | | | Selvtest | Slå av Fullført |
| Gjeldende feil | | | | |
| Klokkeslett | Feil-ID | | | |
| 5/8/2014 3:08:03 AM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney | 0x40221 | | | |
| 5/17/2014 7:29:53 PM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney | 0x50506 | | | |
| 5/17/2014 7:29:53 PM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney | 0x50231 | | | |
| 5/17/2014 7:25:46 PM (GMT+10:00)Canberra, Melbourne, Sydney | 0x30A | | | |

Administrere AED-enhetene

Med en tilkoblet AED-enhet kan du gjennomgå selvtester, skrive ut konfigurasjonen, importere og eksportere AED-data og oppdatere fastvaren.

Skrive ut AED-informasjon

1. Velg en AED-enhet fra listen over enheter. Den trenger ikke være tilkoblet.
2. Velg **Fil | Generer rapport | Skriv ut AED-rapport**.

Importere og eksportere AED-data

Hvis du har lagret en AED-datafil tidligere, kan du laste den opp for å vise den i AED Manager.

Slik importerer du en AED-datafil:

1. Velg **Fil | Eksport**.
2. Velg en fil som skal importeres.

Den importerte AED-enheten dukker opp på listen over ikke-tilkoblede enheter.

Du kan eksportere hele settet med AED-data til et komprimert filformat. Denne filen kan brukes med andre bruksområder for videre analyse.

Slik eksporteres AED-data:

1. Velg AED-enheten som skal eksporteres fra listen over tilkoblede eller ikke-tilkoblede.
2. Velg **Eksport | Valgte AED-data til en enkelt fil** fra **Fil**-menyen.

Alle gjenopplivningene, inkludert EKG-kurven og registrerte gjenopplivningshendelser, blir lagret på en enkel komprimert fil.

Fjernkonfigurere AED-enheter (kun administrator-nivå)

Du kan oppdatere konfigurasjonen til AED-enheter der de befinner seg, i stedet for å bære dem til *AED Manager*-datamaskinen. Ved hjelp av en enkel USB-enhet kan du konfigurere alle AED-enheter du har ansvar for. Oppdater hver AED-enhet der den er, ved å koble USB-enheten til en USB-port. Når du kobler til USB-enheten, kopierer AED-enheten konfigurasjonsparametrene som er valgt.

Slik oppdaterer du en ikke-tilkoblet AED-enhet med en ny konfigurasjon:

1. Velg en AED-enhet fra listen over tilkoblede eller ikke-tilkoblede enheter. Du kan velge hvilken som helst AED-enhet.
Merk: Du må velge en AED-enhet, fordi konfigurasjonen den har, trengs for å klargjøre USB-enheten.
2. Koble en USB-enhet til datamaskinen.
3. Velg **Fil | Klargjør USB-enheten**.
4. Velg USB-enheten i klargjøringsvinduet som vises.
FORSIKTIG! Formatering sletter alle data fra enheten.
5. Klikk på **Neste** for å formatere (forberede) USB-enheten.
6. Velg parametrene du ønsker, i konfigurasjonsvinduet.
Panelene i konfigurasjonsdialogboksen ligner på de du finner under **Sammendrag**-fanen.
7. Gjennomgå konfigurasjonen.
 - Klikk på **Lagre** hvis endringene er fullstendige.Når du klikker på **Lagre**, lagrer AED Manager konfigurasjonsfilene til USB-enheten.
8. Koble enheten fra USB-porten.

Oppdatering av AED-programvare (kun administrator-nivå)

Det kan komme ut ny programvare for AED-enheten fra tid til annen.

Slik oppdateres programvaren:

1. Koble AED-enheten til datamaskinen. (Programvare kan ikke oppdateres med en USB-enhet.)
2. Logg på *AED Manager* som administrator.
AED-enheten vises under **Tilkoblet** på listen over enheter.
3. Velg AED-enheten.
4. Sett inn oppdaterings-CDen i datamaskinen.
5. Velg **Fil | Oppdater AED-programvare**.
6. Klikk på **Oppdater**.



Forsiktig: Enheten er ute av drift.

AED-enheten må være tilkoblet mens fastvaren lastes. AED-enheten kan bli satt ut av funksjon hvis den blir frakoblet før lastingen er fullført.

Når oppdateringen er ferdig, vises meldingen **Oppdatering fullført**. Det er nå trygt å koble fra AED-enheten.

Cardiac Science Corporation • N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 USA • 262.953.3500 • Gratisnummer i USA 800.426.0337

• Faks: 262.953.3499 • care@cardiacscience.com

Teknisk støtte • (USA) Faks: 262.798.5236 • techsupport@cardiacscience.com • (Internasjonal) internationalservice@cardiacscience.com

Cardiac Science, Shielded Heart-logoen, Powerheart, STAR, Intellisense, Rescue Ready, RescueCoach og RHYTHMx er varemerker som tilhører Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2014 Cardiac Science Corporation. Med enerett.



70-00974-17 E

