

# PROCEDIMIENTO DE REAMINACIÓN

1



¿Responde el paciente a los estímulos?

2




Llame a los servicios de urgencias.

3



Consiga un dispositivo DEA.

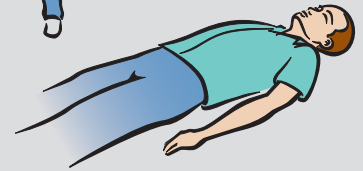

4



Coloque el DEA en el suelo. Abra la tapa.

5



Retire la ropa al paciente. Deje el pecho al descubierto.

6



Coloque los electrodos.

7



No toque al paciente.

8




Si el DEA se lo indica, pulse el botón rojo parpadeante.

9



Coloque el dispositivo de RCP, si dispone de uno.

10

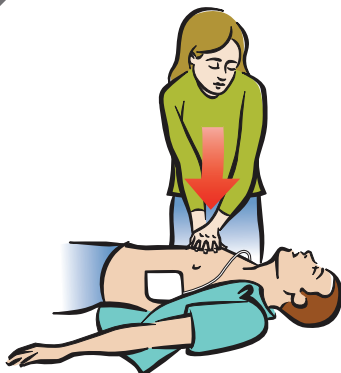

Siga las instrucciones del DEA. Realice compresiones.

11



Si se le indica, realice insuflaciones.

## DEA semiautomático



Cardiac Science y el logotipo del corazón blindado son marcas comerciales de Cardiac Science Corporation.

Copyright © 2012 Todos los derechos reservados. N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 EE. UU. [www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Alemania



70-01091-05rC

