

UTFÖRA EN RÄDDNING

1



Reagerar patienten på tilltal?

2




Ring efter ambulans!

3



Hämta
AED-enheten.

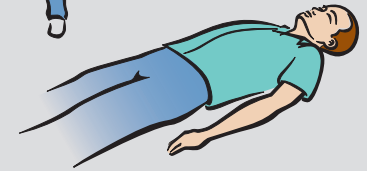

4



Placera AED-enheten
på marken.
Öppna locket.

5



Avlägsna kläderna.
Blotta bröstkorgen.

6



Fäst elektroderna.

7



Vidrör inte patienten.

8




Vid eventuell instruktion,
tryck på den röda
blinkande knappen.

9



Om HLR-enhet finns,
placera den på patienten.

10

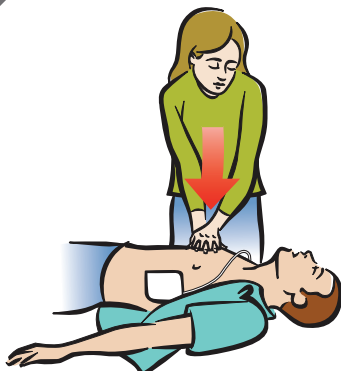

Följ AED-enhetens
meddelanden.
Ge kompressioner.

11



Vid eventuell instruktion,
ge inblåsningar.

Halvautomatisk AED



Cardiac Science och logotypen med hjärtsymbolen är varumärken
som tillhör Cardiac Science Corporation.

Copyright © 2012 Med ensamrätt.

N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Tyskland



70-01091-13rC

