

# DURCHFÜHREN EINER REANIMATION

1



Reagiert der Patient?

2



Rufen Sie den Rettungsdienst!

3



AED holen.

4




AED am Boden abstellen.  
Abdeckung öffnen.

5




Kleidung entfernen.  
Brust freilegen.

6

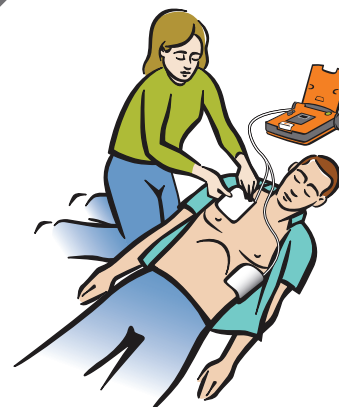

Elektroden anbringen.

7

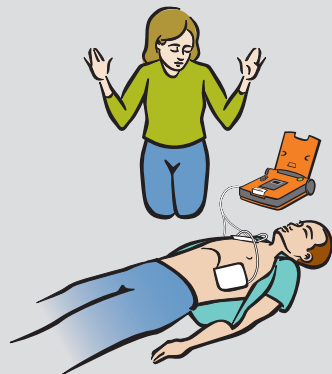


Berühren Sie den Patienten  
nicht während der Analyse.

8




Bei Anweisung die rot  
blinkende Taste drücken.

9

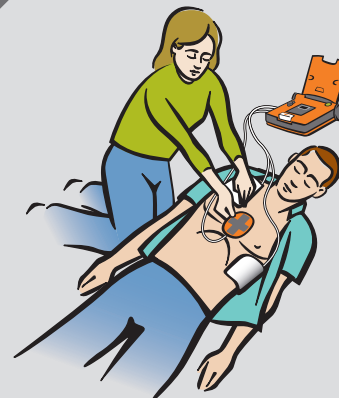

HLW-Gerät anbringen,  
wenn vorhanden.

10

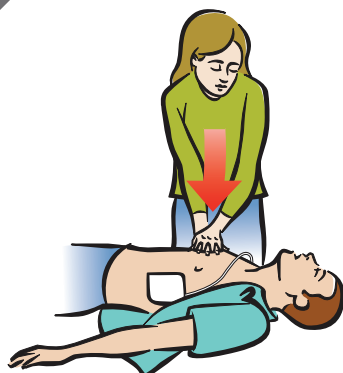

Anweisungen des  
AED befolgen.  
Kompressionen durchführen.

11



Bei Anweisung  
Atemspenden geben.

## Halbautomatischer AED



Cardiac Science und das Shielded Heart-Logo sind Marken  
der Cardiac Science Corporation.  
Copyright © 2012 Alle Rechte vorbehalten.  
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 USA  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germany



70-01091-83rB



# DÉROULEMENT D'UNE INTERVENTION

1



Le patient réagit-il ?

2




Appelez les services d'urgence !

3



Munissez-vous d'un DAE.

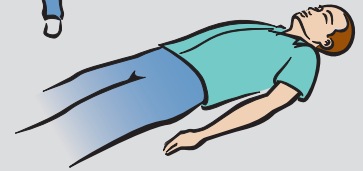

4



Posez le DAE sur le sol. Ouvrez le couvercle.

5



Enlevez les vêtements. Dénudez le thorax.

6



Placez les électrodes.

7



Ne touchez pas le patient.

8




Si le système vous y invite, appuyez sur le bouton rouge clignotant.

9



Si un appareil de RCP est disponible, positionnez-le.

10

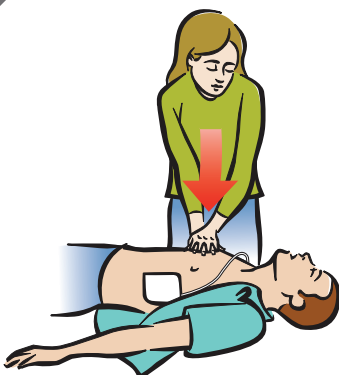

Suivez les invites du DAE. Administrez les compressions.

11



Si le système vous y invite, administrez les insufflations.

## DAE semi-automatisé



Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont des marques commerciales de Cardiac Science Corporation.  
Copyright © 2012. Tous droits réservés.  
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186, États-Unis  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hanovre  
Allemagne



70-01091-83rB

