

# DÉROULEMENT D'UN SAUVETAGE

1



Le patient réagit-il ?

2




Appelez les secours !

3



Allez chercher  
le DAE.

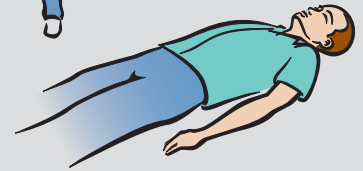

4



Placez le DAE par terre.  
Ouvrez le couvercle.

5



Enlevez les vêtements.  
Dénudez la poitrine.

6



Attachez les électrodes.

7



Ne touchez pas le patient.

8




Si vous y êtes invité, appuyez sur  
le bouton clignotant rouge.

9



Le cas échéant, mettez  
en place l'appareil de RCP.

10

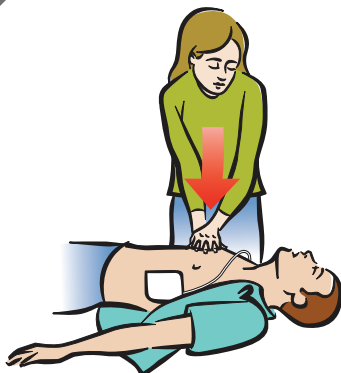

Suivez les invites du DAE.  
Administrez les compressions.

11



Si vous y êtes invité,  
administrez des insufflations.

DAE semi-automatique



Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont  
des marques commerciales de Cardiac Science Corporation.  
Copyright © 2012 Tous droits réservés.  
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 États-Unis  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Allemagne



70-01091-20 A

